

---

## Monteringsvejledning (DK)

Gazelle PS - Underbensvinkling

## Monteringsanvisning (SV)

Gazelle PS - Vinkling av benstöd

## Mounting instruction (GB)

Gazelle PS - Angling of the lower leg

## Montageanleitung (D)

Gazelle PS - Kniewinkelverstellung

## Montage handleiding (NL)

Gazelle PS - Hoekverstelling voor het onderbeen

# Monteringsvejledning


## Gazelle PS - Underbensvinkling

R82<sup>®</sup>

Underbensvinklingen monteres på abduktionsstangen.

- 1) Afmonter fodstøtterne ved at løsne gantergrebet (A).
  - 2) Afmonter hele knæstøtten ved at løsne unbracoskruen (B).
- Montering af underbensvinklingen:
- 3) Først monteres (C), derefter påsættes knæstøtten igen, monter derefter (D).
  - 4) Monter fodstøtten på underbensvinklingen (E).

Vinklingen justeres ved hjælp af gantergrebet (F).

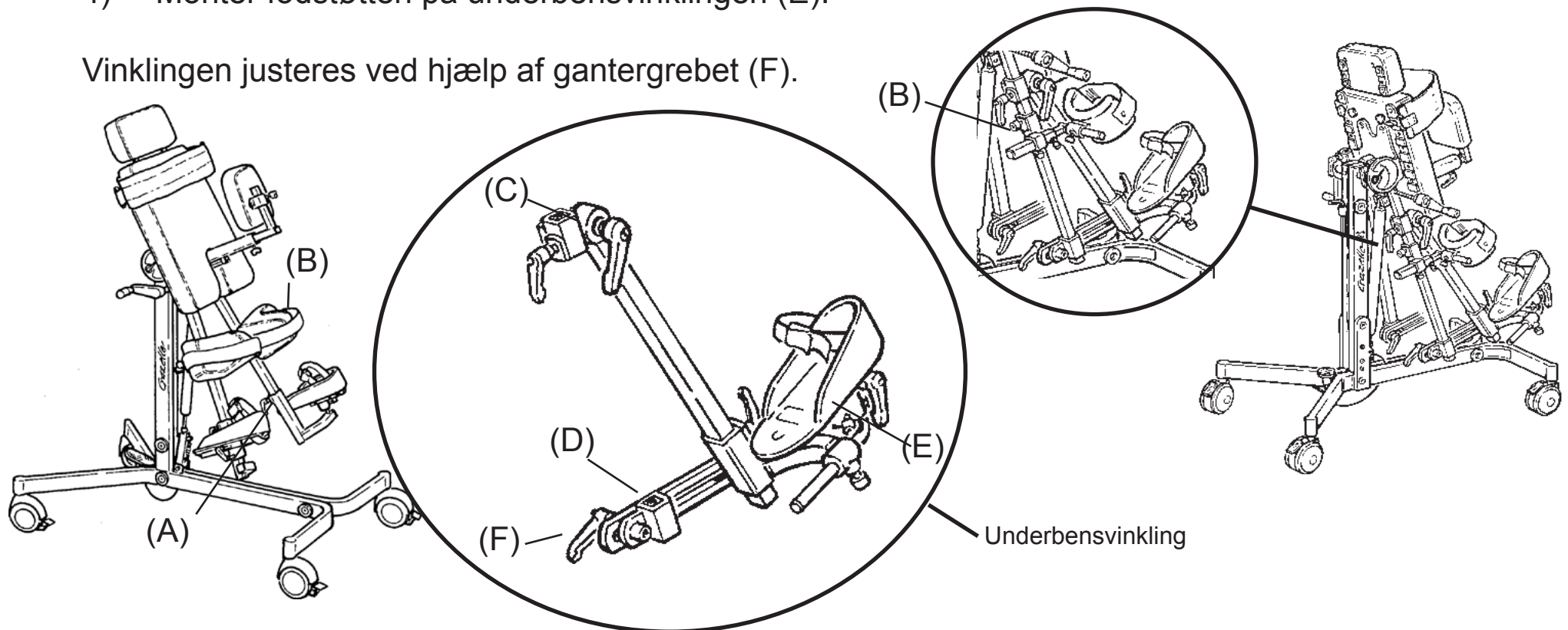

# Monteringsanvisning

R82<sup>®</sup>

## Gazelle PS - Vinkling av benstöd


Montera staget för benstödet på abduktionsstaget enligt följande:

- 1) Lossa handtaget (A) för att ta bort fotplattan.
- 2) Lossa sexkantsmuttern (B) för att ta bort knästödet.

Montera vinkling av benstöd:

- 3) Montera först (C), montera sedan knästödet igen och sedan (D).
- 4) Montera fotplattan på staget för vinkling av benstödet (E).

Justera vinkeln genom att vrida på handtaget (F).

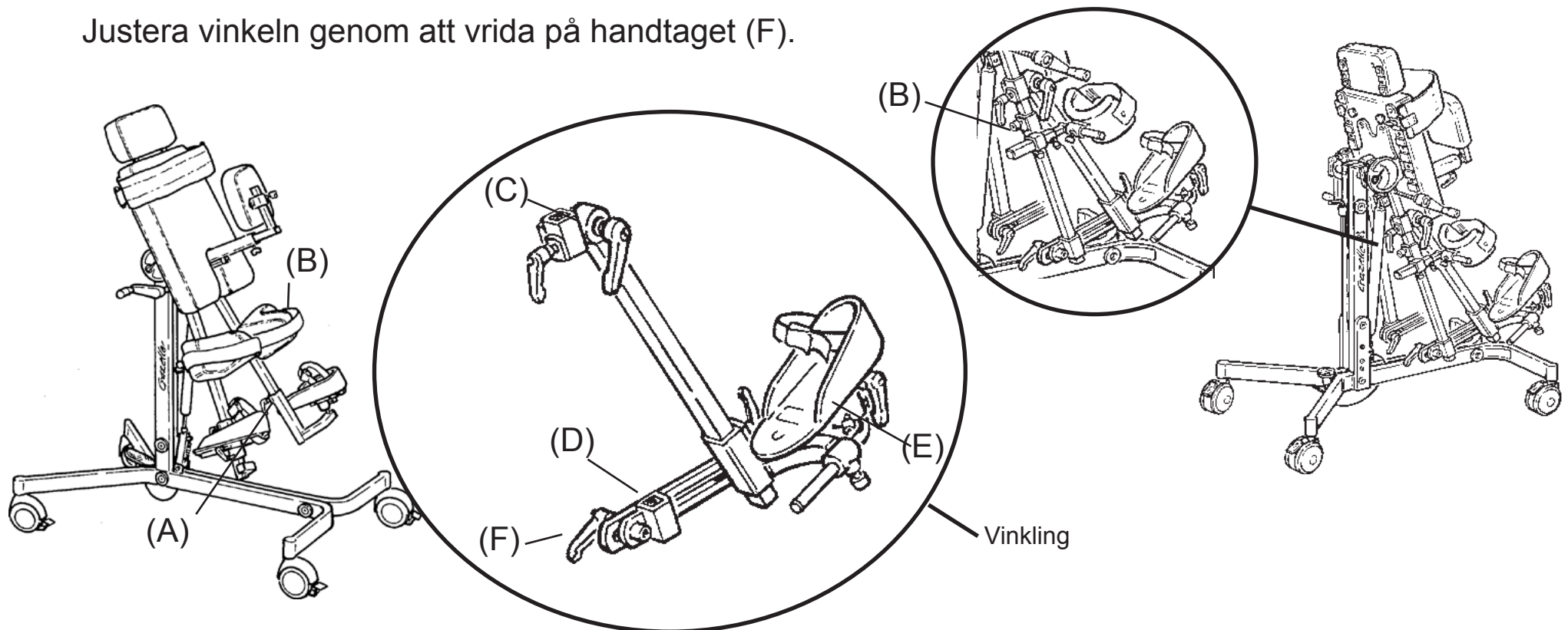

# Mounting instruction


R82<sup>®</sup>

## Gazelle PS - Angling of lower leg

Mount the bar for the lower leg angling on the abduction bar, as follows:

- 1) Loosen the handle (A) to remove the foot support.
- 2) Loosen the Allen screw (B) to remove the knee support.  
How to mount the angling of lower leg:
- 3) First mount (C), then mount the knee support again, then mount (D).
- 4) Mount the foot support on the bar for the lower leg angling (E).

Adjust the angling by turning the handle (F).

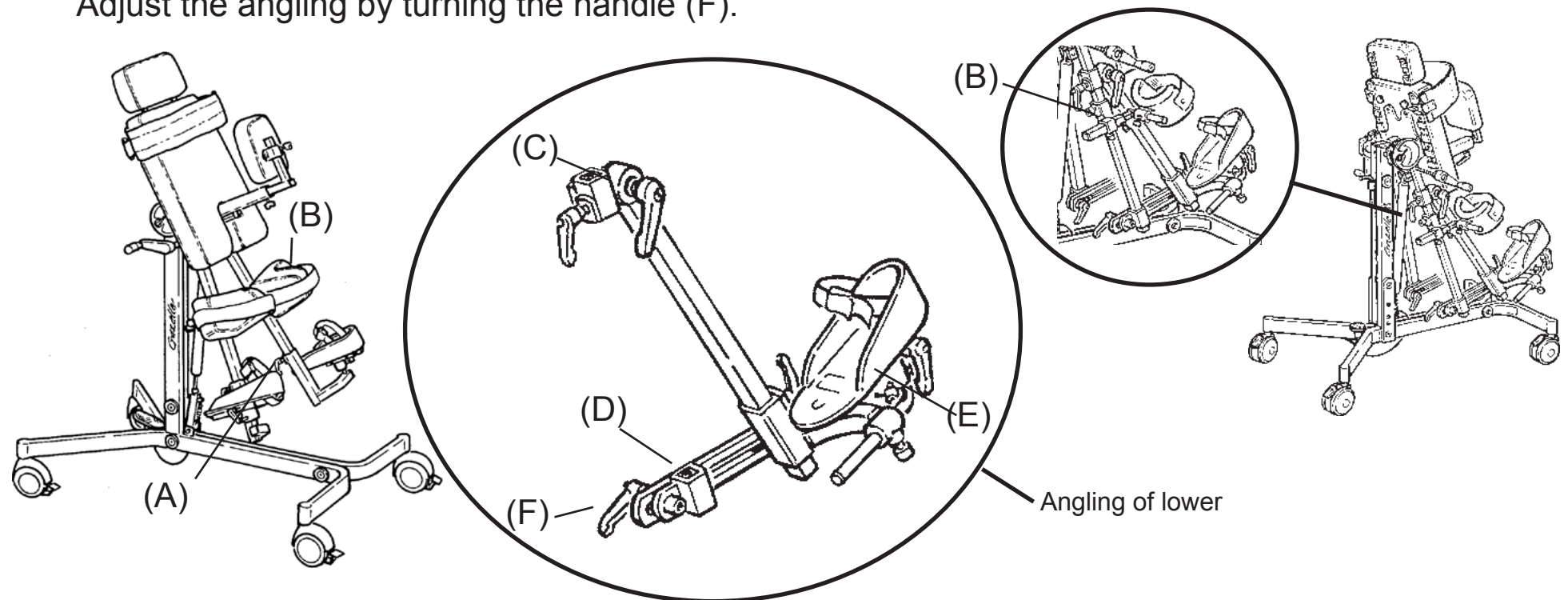


# Montageanleitung

R82<sup>®</sup>

## Gazelle PS - Kniewinkelverstellung

- 1) Den Hebel (A) lösen, um die Fußschalen zu entfernen.
- 2) Die Inbussschraube (B) lösen und die Kniepelotte entfernen.  
Montage der Kniewinkelverstellung:
- 3) Zuerst Montage von (C), dann die Kniepelotte wieder montieren und schließlich (D) montieren.
- 4) Die Fußschale auf die Stange der Kniewinkelverstellung (E) montieren.

Die Justierung erfolgt durch Drehen des Hebels (F).

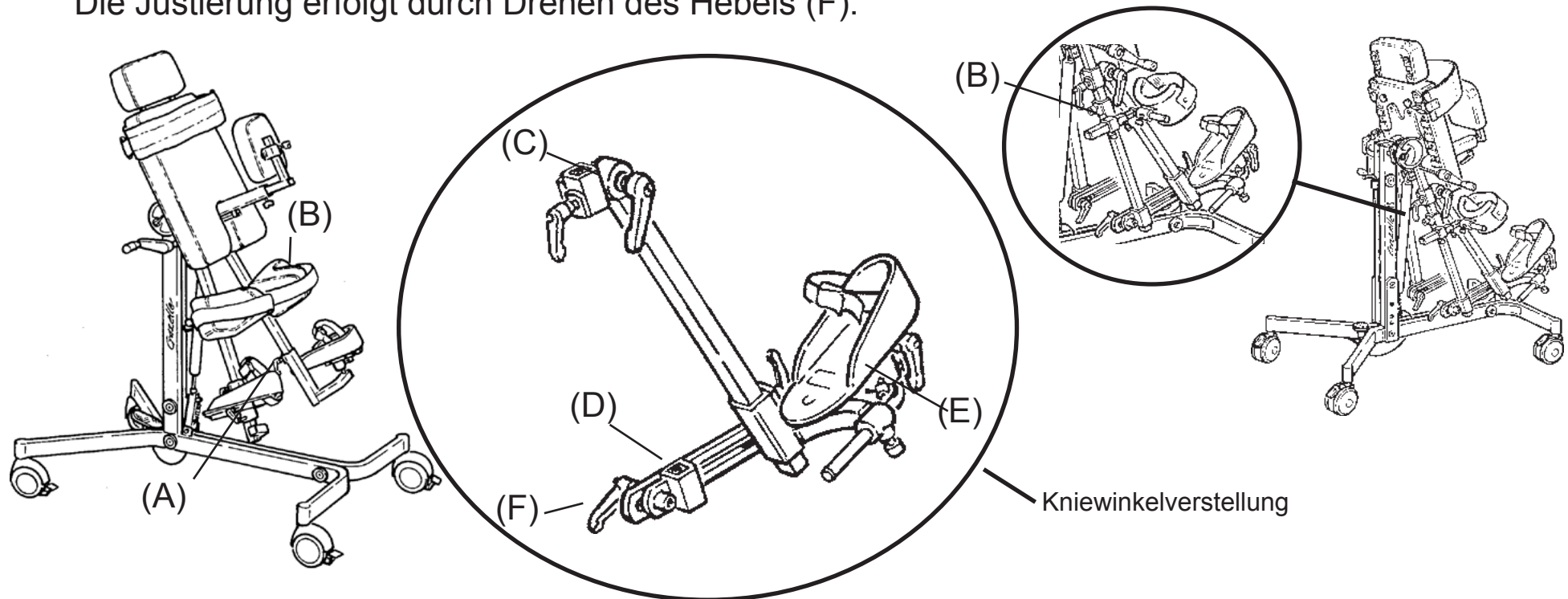

# Montage handleiding

R82<sup>®</sup>

## Gazelle PS - Hoekverstelling voor het onderbeen

De hoekverstelling voor het onderbeen (art.nr. 88165-x) kan worden gebruikt als het onderbeen niet voldoende kan worden gestrekt. Monteer deze als volgt.

- 1) Draai de handle (A) los en verwijder de voetsteun.
- 2) Draai de inbusbout (B) los en verwijder de kniesteun.
- 3) Monteer vervolgens (C) de onderbeen-hoekverstelling. Plaats dan de kniesteun terug en monteer daarna (D).
- 4) Monteer de voetsteun op de stang van de onderbeen-hoekverstelling (E).

Verstel de hoek van het onderbeen d.m.v. de handle (F) los- en vast te draaien

