



Etac My-Loo

Vastgemonteerde
toiletverhoger

 **etac**[®]

Etac My-Loo

Etac My-loo is een goed ontworpen toiletverhooger met unieke, gepatenteerde toiletarmsteunen en een snelle en eenvoudige montage. De My-Loo is een veilige toiletondersteuning, met een hoog comfortniveau en kenmerkt zich door het gebruiksgemak. Geschikt voor de meeste toiletputten en blijft veilig op zijn plaats zitten.

Ontworpen om onafhankelijkheid en eigenwaarde te behouden

My-Loo stelt gebruikers met beperkte mobiliteit of evenwichtsproblemen in staat om zelfstandig en veilig naar het toilet te gaan. De verhoogde toiletbril en stabiele armsteunen maken het zitten en opstaan eenvoudiger. De extra grote zitopening en uitsparingen maken de persoonlijke hygiëne makkelijker. Bij weinig ruimte in de badkamer, kan er ook gekozen worden om één of twee armsteunen (tijdelijk) te demonteren.

Beschikbaar in vijf uitvoeringen

Etac My-Loo met vaste montage is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en in zithoogtes van 2, 6 en 10 cm hoog. Er kan gekozen worden voor de My-Loo met of zonder armsteunen. Het is de perfecte ondersteuning rondom het toilet, zonder hiervoor te hoeven boren in wanden of de vloer. Dankzij het moderne en discrete ontwerp past de My-Loo prachtig in de meeste badkamers. Wordt geleverd met bril én deksel.



Etac My-Loo toiletverhooger vastgemonteerd.		Item no.	Materiaal
My-Loo met armsteunen, 2 cm		e80301510	Armsteun: Polypropyleen
My-Loo met armsteunen, 6 cm		e80301511	Zitting: Polypropyleen
My-Loo met armsteunen, 10 cm		e80301512	Bevestiging: RVS, Polypropyleen, TPE
My-Loo, 6 cm		e80301513	
My-Loo, 10 cm		e80301514	
Gewicht			Design
My-Loo met armsteunen, 2 cm: 3.2 kg	My-Loo, 6 cm: 2.2 kg		Myra Industriell Design AB
My-Loo met armsteunen, 6 cm: 3.4 kg	My-Loo, 10 cm: 2.4 kg		
My-Loo met armsteunen, 10 cm: 3.7 kg			
Maximaal gebruikersgewicht			Onderhoud
150 kg			
Inclusief steunpoten, 80301603: 200 kg			
			Reinig het product met een niet-schurend reinigingsmiddel met een pH tussen de 5 en 9 of met een desinfecterende oplossing van ten minste 70%. Het product kan veilig gereinigd worden in een wasruimte op 85 °C gedurende 3 minuten.

Kenmerken



Verstelbare armsteunen

Dankzij de unieke en gepatenteerde oplossing kunnen de armsteunen snel en eenvoudig in drie verschillende hoogtes op en neer bewogen worden, voor de beste ondersteuning. De stabiele armsteunen geven geen beknellingsgevaar.



Eenvoudige installatie

De My-Loo kan snel en eenvoudig ge(de-)monteerd worden dankzij de innovatieve, nieuwe oplossing. Praktische moeren maken het mogelijk om de verhoogde toiletzitting (en armsteunen) van bovenaf te bevestigen en in de beugels te klikken.



Ruim en praktisch

Royale uitsparingen en een extra grote toiletopening zorgen voor een uitstekende toegankelijkheid. De verhoogde toiletzitting, met ruimte rondom de zitting, biedt genoeg ruimte voor alle lichaamstypes.



Stabiel

De My-Loo zit stevig vast en heeft een maximaal gebruikersgewicht van 150 kg. Voor extra ondersteuning en meer draagvermogen kunnen de optionele steunpoten worden toegevoegd (max. gebruikersgewicht tot 200 kg).



Veilig en comfortabel

Met stabiele, gemakkelijk vast te pakken armsteunen en een goed ontworpen zitting, maakt de My-Loo elk toiletbezoek veilig en comfortabel. Voor extra comfort kan er een zachte zitting toegevoegd worden.



Makkelijk schoon te maken

De gladde oppervlakten zijn eenvoudig af te nemen met een zachte doek. Verwijder de zitting gemakkelijk uit de beugels wanneer deze apart van de armsteun gereinigd dienen te worden. Eenvoudig weer terug te klikken na reinigen.



My-Loo met armsteunen
2 cm



My-Loo met armsteunen
6 cm



My-Loo met armsteunen
10 cm




My-Loo
6 cm



My-Loo
10 cm

Afmetingen

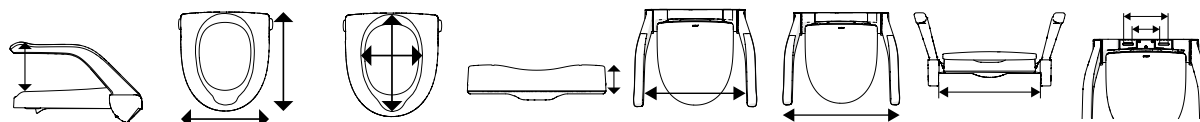

Model	Hoogte armsteun	Breedte/Lengte	Binnenmaten	Hoogte	Afstand tussen armsteunen	Totale breedte	Bevestigingsbreedte (max toilet breedte)	Hartmaat montagegaten
e80301510	215/245/285 mm	360/400 mm	215/285 mm	20 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
e80301511	175/205/245 mm	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
e80301512	135/165/205 mm	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
e80301513	-	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm
e80301514	-	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm

Accessoires



Soft seat

e80301604
Ergonomische vorm, zacht en comfortabel.
Uitstekende drukverlichting en comfortabele ondersteuning.
Materiaal: Polyurethaan



Montageset voor blinde gaten

e80301626
Voor toiletten zonder montagegaten (blinde fitting). Mag alleen gebruikt worden in combinatie met de steunpoten. Geschikt voor bevestigingsgaten van Ø20 mm. Materiaal: aluminium, polyamide, roestvrij staal, EPDM



Steunpoten

e80301603
Voor extra stabiliteit. Verhoogt max. gebruikersgewicht tot 200 kg. Opklapbaar.
Materiaal: aluminium, polyamide, polypropyleen, TPE, roestvrij staal



Closetrolhouder

e80301601
Bevestiging aan armsteun
Materiaal: Polyamide, roestvrij staal



Mandje

e80301602
Bevestiging aan armleuning
Materiaal: polyamide, polyester / mesh, roestvrij staal



Dwarsstang

e80303034
Een veilige steun om aan vast te houden.
Wordt bevestigd aan armsteunen. 60,5 cm
Materiaal: Aluminium, polyethyleen



Armsteunen

e80301606
Per paar, links en rechts.
Materiaal: Polypropyleen

Etac is wereldwijd toonaangevend in ergonomische hulpmiddelen en apparatuur voor het helpen van mensen. Ons hart ligt bij het leveren van oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de familie en zorgverleners.

Kijk op www.etac.com/nl voor meer nieuws of productinformatie