

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

# PI - Produktinformation

## Molift Air 350

Molift Air 350 er en smart, brugervenlig loftlift med en løftekapacitet på op til 350 kg. I kombination med Molift skinnesystem og sejl udgør denne kompakte og kraftfulde loftlift en komplet løsning til patienthåndtering som kan løse langt de fleste dagligdags forflytningsbehov inden for sundhedsplejen. Molift Air 350 er optimal til brug i institutioner, plejeboliger og i hjemmeplejen.

### Fremragende løftekapacitet

Lille og letkørende løftemotor.  
Egenvægt 8,56 kg!  
Løftekapacitet (SWL) 350 kg.  
Størrelsen og vægten gør den meget let at betjene og håndtere i de forskellige forflytningssituationer.

### Batteriindikator

Batteriindikatoren viser meget tydeligt løbende status på batteriniveauet og hvornår det er tid til at oplade løftemotoren.

### Stort løfteinterval

Molift Air 350 har som standard en 3 m. løfestrop, og dermed et af de største standard-løfteintervaller på markedet.

### Mange anvendelsesmuligheder

Liften kan anvendes med både 2- og 4-punktsåg. Løfteåg fås i forskellige størrelser og skiftes let uden brug af værktøj.

### Enkel montage

Smart Quick release løbekat og løftemotorens lette egenvægt gør det nemt at opsætte/nedtage løftemotoren. Løftemotor og løbekat adskilles nemt uden brug af værktøj. Kan ligeledes benyttes i andre skinnetyper/fabrikater.

### Den gode oplevelse


For at give patienten en komfortabel og tryk oplevelse, er liften meget lydsvag og med blød start - og stop funktion.

### Nødfunktioner

Nødstop og nødfor.  
Nulstilles nemt fra gulvet, vha. det integrerede plastrør.

### Intuitiv håndbetjening

Den enkle og brugervenlige håndbetjening placeres nemt på integreret holder eller i en vægmonteret dockingstation.

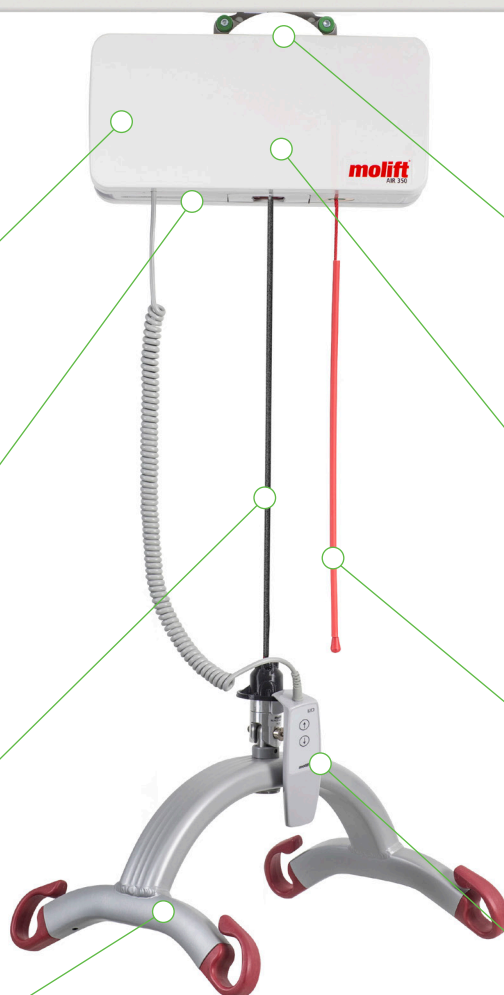

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller Intern salg på:  
info@etac.dk  
tlf. +45 79 68 58 33

**etac**<sup>®</sup>

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt	Beskrivelse	Varenr.	HMI-nr.
Molift Air 350	Loftlift, håndbetjening, lader, SLA batteri	M26350	122610
Molift Air 350	Loftlift, håndbetjening, lader, Lithium batteri	M26351	122611

Indføres fra

Uge 8 2020

## Fakta

Max. brugervægt (SWL)	350 kg
Total vægt (inkl. SLA batteri)	8,6 kg
Længde	360 mm
Bredde	190 mm
Højde	195 mm
Batteri SLA	26.4 V SLA 2.6 Ah
Batteri Lithium	25.6 V LiFePO4 2.4 Ah
Batterilader	100–240 V AC, 40–60 Hz
Ladetid, batteri	6 timer
Løftemodul	24 V DC
Løfteinterval	2600 mm
Løftehastighed ved 75 kg	60 mm/sek.
Forventet levetid	30.000 lifts SWL/10 år
Molift service software	Inkluderet
Softstart/-stop	Inkluderet
Nødfir	Elektrisk og Mekanisk
Nødstop	Kan nås fra gulv Reset muligt fra gulv
Tæthedsklasse: håndbetjening og løftemodul	IP24

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.dk  
tlf. +45 79 68 58 33

