

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Til Kudu

etac®

Vi har foretaget forbedringer på Kudu kørestolen, hvorfor de forskellige størrelser har fået nye varenumre og HMI-numre. Samtidig med forbedringerne har vi korrigeret hjulstørrelserne på stolene.

Forbedringerne er kort som følger:

- Kudu str. 1 og 2 er udstyret med 22" drivhjul og 7" forhjul
- Kudu str. 3 og 4 er udstyret med 24" drivhjul og 7" forhjul


Dermed opnås den højeste position, som på str. 1 og 2 er 50,5 cm og på str. 3 og 4 er 53 cm. Således er stolen velegnet til lange brugere.

Kudu kørestolen kan desuden bestilles med 16" og 20" drivhjul, og uden camber (dette er ikke lagervare).

Der er mulighed for at montere vinkeljusterbare armlæn, dette anbefales dog ikke til stole med 24" drivhjul.

Der er endvidere kommet nyt transportbeslag. Dette beslag kan benyttes til alle Kudu kørestole uanset baghjulstørrelse.

Det er nu også muligt at få delte fodplader på din Kudu str. 2, 3 og 4. Disse monteres ved at afmontere foreste sædeplade og herefter påmontere den nye sædeplade inkl. delte benstøtter.

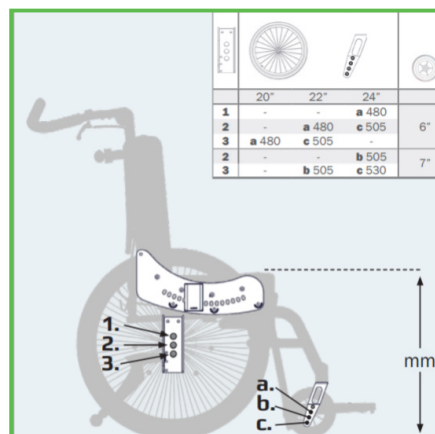

Produkt information

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Produkt navn	Gl. Art.nr-UDGÅR	Nyt Art. nr.	HMI nr.
Kudu str. 1	3195131714311	3195131716321	123145
Kudu str. 2	3195231714311	3195231716321	123148
Kudu str. 3	3195331716311	3195331718321	123152
Kudu str. 4	3195431716311	3195431718321	123155
Transportbeslag	3195900-10	3195900-16	
Fodstøtte delt, Kudu str. 2		3195151-260	
Fodstøtte delt, Kudu str. 3		3195151-360	
Fodstøtte delt, Kudu str. 4		3195151-460	
Indfases fra			Uge 11, 2020

Alle Kudu str. har idag:

- Tipsikringer, som passer til alle hjulstørrelser.
- Drivhjul med massive indlæg istedet for flexel.
- Højdejusterbar kørebøjle.

Tipsikringer

Disse tipsikringer, som er standard på Kudu modellerne har to højdeindstillinger, hvilket giver to fordele:

1. Muligheden for en passiv (lang) indstilling eller en aktiv (kort) indstilling. Tipsikringen kan således tilpasses brugerens funktionsniveau.
2. Muligheden for at kombinere 24" drivhjul med 7" forhjul, hvilket giver en sædehøjde på 53 cm.

Tipsikringerne kan også købes som reservedel til de ældre Kudu modeller.

Produkt navn	12½"	16"	20"	22"	24"
Tipsikringer til Kudu med 6" forhjul	31950953-1	31950953-1	31950953-1	31950953-1	31950953-1
Tipsikringer til Kudu med 7" forhjul	-	-	-	31950958-1	31950958-1
Tipsikringer til Kudu 0° cambring med 6" forhjul	-	-	31950953-0	31950953-0	31950953-0
Tipsikringer til Kudu 0° cambring med 7" forhjul	-	-	-	31950958-0	31950958-0

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac[®]

Drivhjul med massive indlæg istedet for flexel

De punkterfrie hjul til Kudu, er med Smart Inlay. Denne type punkterfrie hjul fyldes via luftventilen, så hjulet bliver massivt og punkterfrit, hvilket giver hjulene gode køreegenskaber. Efter hjulet er fyldt, skal ventilen ikke længere anvendes. For nemt at kunne identificere disse ventiler, er de påsat en grøn kappe - ventilen kan ikke benyttes til at fylde luft i dækket, da dækket er massivt.



Produkt navn

Art.nr.

20" hjul med tromlebremse m. Smart Inlay	313102025
22" hjul med tromlebremse m. Smart Inlay	313102225
24" hjul med tromlebremse m. Smart Inlay	313102425

Højdejusterbar kørebøjle

En af Kudu's mange gode features har altid været tiltfunktionen, der giver bruger en komfortabel og stabil siddestilling. samtidig med at tyngdepunktet forbliver optimalt. Hjælperen kan med denne kørebøjle opnå en hensigtsmæssig arbejdsstilling når stolen skal køres bagudtiltet idet kørebøjlen kan indstilles i højden.

Kørebøjlen rummer 5 højdeindstillinger og kan herefter finindstilles via vinklingen i bøjlen.

Det er muligt at købe kørebøjlen som reservedel i to varianter:

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

etac[®]

Variant et er til den gamle Kudu model, hvor der ikke var forhøjet beslag på. Til den skal der tilkøbes forhøjet beslag samt kørebøjle (Art. nr. 3195630-10 og Art. nr. 3195629-1/2/3/4).

Variant to, er som reservedel til den nye Kudu model, hvor der i forvejen er forhøjet beslag monteret, og derfor er det kun kørebøjlen, der skal tilkøbes (Art. nr. 3195629-1/2/3/4).

Produkt navn	Art.nr.
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 1	3195629-1
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 2	3195629-2
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 3	3195629-3
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 4	3195629-4
Forhøjerkit for Kudu	3195630-10